

COMO CONTROLAR A HEMORRAGIA COM RISCO DE VIDA COM **CELOX™ APPLICATOR**

A hemorragia não controlada é responsável por mais de 35% das mortes pré-hospitalares



1. Identifique a hemorragia grave



2. Exponha o ferimento - corte ou rasgue a roupa em volta do ferimento



3. Identifique o foco da hemorragia - e aplique




5a. Aplique na fonte da hemorragia - ele tem dois entalhes de rasgar, um em cada canto superior



5b. Aplique na fonte da hemorragia - abra a embalagem, segure o aplicador na bolsa enquanto ainda aplica pressão



5c. Aplique na fonte da hemorragia - para preparar o aplicador, remova a tampa da parte superior do aplicador e insira o êmbolo no tubo do aplicador. Quando estiver pronto para aplicar, remova a tampa azul do aplicador

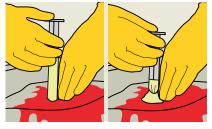

5d. Aplique na fonte da hemorragia - insira o aplicador com o êmbolo o mais longe possível da ferida. Empurre lentamente o êmbolo enquanto retira o aplicador e libere os grânulos para encher acima do nível da pele. Aplicadores ou embalagens de grânulos adicionais podem ser usados, se necessário



6. Cubra e aplique pressão firme por 5 minutos ou até o sangramento parar



7. Prenda com um curativo para manter a pressão e descartar qualquer produto restante não utilizado



8. Transfira a vítima para a próxima etapa do

PENSE EM HEMORRAGIA GRAVE

<C> = Hemorragia grave

A = Via aérea

B = Respiração

C = Circulação

D = Incapacidade

E = Exposição

For full details, warnings and removal instructions refer to manufacturer's instructions for use.







